


# Abri-Form Premium S4

## INCONTINENCE

**ABRI-FLEX**  
Premium



60 - 85 cm

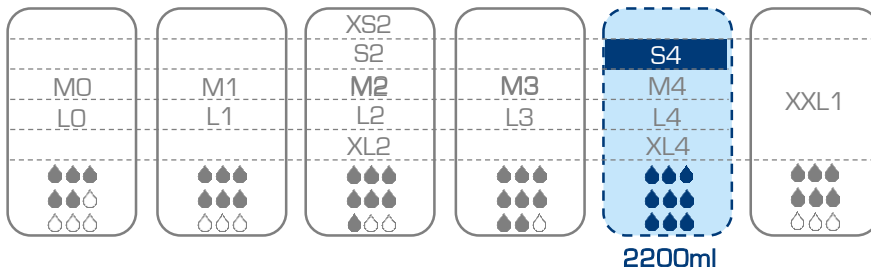

UTILISATEURS

SEMI AUTONOME

ALITÉ

INCONTINENCE LOURDE



### Top Dry - Couche d'acquisition pour effet garde-au-sec

La couche d'acquisition est située entre le coussin absorbant et le voile externe supérieur. Elle se compose d'un alliage de fluff et non-tissé. Sa fonction est d'améliorer l'absorption rapide du liquide et de favoriser sa répartition sur une zone plus large, ralentissant ainsi la saturation du change. Hydrophile, la couche d'acquisition laisse pénétrer le liquide mais l'empêche de ressortir, permettant ainsi à la surface interne du change de rester sèche.



### Système anti-odeurs

Les agents super absorbants (SAP) absorbent le liquide et capturent les odeurs à l'intérieur du change.



### Barrières anti-fuites

Les barrières anti-fuites hydrophobes sont situées au niveau des jambes et permettent un ajustement parfait du change à la morphologie de l'utilisateur.




### Air Plus - Voile externe respirant

Le voile externe (BTBS) laisse la peau respirer, garantissant son intégrité et limitant les risques de dermatites associées à l'incontinence.



### Adhésifs extensibles et repositionnables

Les adhésifs extensibles offrent un confort d'utilisation optimal pour un ajustement parfait à la morphologie de l'utilisateur. Repositionnables, ils ne déchirent pas la protection une fois retirés.

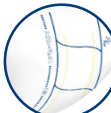

### Témoin de saturation


Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide. L'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation facilement.

# Abri-Form Premium S4

## DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% fluff de cellulose, TCF (blanchi sans chlore)
Sous-couche	Couche d'acquisition, non-tissé blanc
Non-tissé	Polypropylène (PP), hydrophile permanent
Barrières	Polypropylène (PP), non-tissé hydrophobe
Elastiques	Elasthanne, sans latex
Voile externe	Voile externe textile respirant (BTBS, Breathable Backsheet)
Adhésif (colle)	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates
SAP	Super absorbant, polyacrylate, sans phtalates
Marquages	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.

## DIMENSIONS PRODUIT

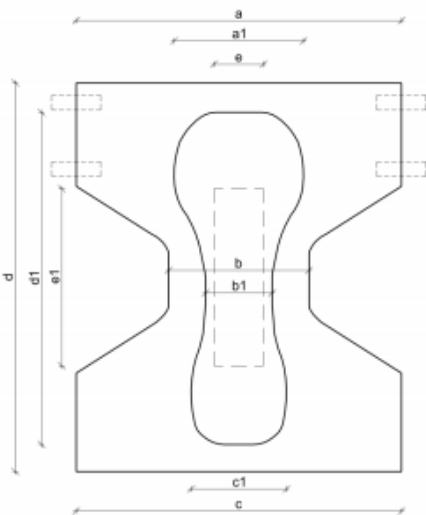

d	Longueur	690 mm
a	Largeur, devant	520 mm
c	Largeur, arrière	520 mm
b	Largeur, entre-jambes	250 mm
<i>Cœur absorbant</i>		
d1	Longueur	560 mm
a1	Largeur, devant	290 mm
c1	Largeur, arrière	300 mm
b1	Largeur, entre-jambes	160 mm
<i>Sous-couche (ADL)</i>		
e1	Longueur	290 mm
e	Largeur	100 mm

## ABSORPTION

Poids produit : 106g

Test Rothwell ISO 11948-1	2200 ml
Absorption Méthode Hy-tec PA02/02	1033,76g
Temps d'absorption Méthode Hy-Tec PA02/03	5,61 ml/s
Rewet Méthode Hy-Tec PA02/04	0,18g



Dispositif médical  
Classe 1  
93/42/CEE



Ecolabel Nordic  
Swan  
Produits respectueux de  
l'utilisateur et de son  
environnement



Label FSC  
Cellulose provenant de  
forêts responsables



Testé dermato-  
logiquement  
Produits sans risques  
d'iritation



ISO 9001  
ISO 14001

OHSAS  
18001:2008

Management de la  
santé et de la  
sécurité au travail



GMP

Good  
Manufacturing  
Practices



# Abri-Form Premium S4



## DONNÉES LOGISTIQUES

Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton	
3	22	66	
Cartons / Palette	Hauteur palette	Cartons / Palette gerbée	
18	1,272 m	36	
EAN Sachet		EAN Carton	
57 03538 759857		57 03538 759871	
Dimensions carton	Poids brut carton	Poids net carton	Dimensions sachet
70,6 x 39,6 x 18,7 cm	7 521 g	6 996 g	40 x 15 x 24 cm

## GUIDE D'UTILISATION

Plier la protection dans le sens de la longueur, face plastifiée à l'extérieur. Ne pas toucher la surface intérieure de la protection.

Installer le patient sur le côté. Glisser le change de l'avant vers l'arrière.

Installer le patient sur le dos. Déplier le change à l'avant en créant un godet entre les jambes.

Coller les adhésifs supérieurs, légèrement inclinés vers le bas sur le pli formé.


Coller les adhésifs inférieurs en assurant un maintien confortable.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Découvrez la gamme complète de soins de la peau et d'essuyage corporel ABENA



 [www.abena-frantex.fr](http://www.abena-frantex.fr)

